

Benutzerhandbuch qubeCPRFeedback



Stand 21.10.2020



	1
ALLGEMEINE HINWEISE	3
ENTSORGUNG	3
UPDATES	3
SYSTEMEINSTELLUNGEN	3
KONTROLLZENTRUM ÖFFNEN	3
WLAN VERBINDUNG HERSTELLEN	3
SOFTWAREBEDIENUNG	4
SENSOR KALIBRIEREN	6
CPR POD	6
IMPRESSUM	7



ALLGEMEINE HINWEISE

ENTSORGUNG

Da in unseren Sendungen Batterien und Akkus enthalten sein können, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z. B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und können verwertet werden.

Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder an uns zurücksenden oder in unmittelbarer Nähe (z. B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen oder in unserem Versandlager) unentgeltlich zurückgegeben. Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für Endnutzer für die übliche Mengen sowie solche Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment führt oder geführt hat.

UPDATES

Bitte führen Sie keine Updates auf neue Betriebssysteme des Tablet Herstellers Apple aus, ohne dass diese von SKILLQUBE freigegeben werden. Dennoch bitten wir Sie die Applikation regelmäßig zu aktualisieren, somit können wir die volle Funktionalität und Kompatibilität gewährleisten. Bei Fragen oder Technischen Problemen können Sie unter www.skillqube.com/support Hilfe finden.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Mit der qubeSERIE haben Sie sowohl bei allen Monitoren als auch beim Controller die Möglichkeit vordefinierte Einstellungen anzupassen. Hierzu zählen beispielsweise das Ändern der Einheiten für Temperatur, Beatmung und Blutzucker oder das Einstellen der Reanimationsdauer des AED bei den Monitoren

KONTROLLZENTRUM ÖFFNEN

Zum Öffnen streichen Sie auf einem beliebigen Bildschirm vom unteren Bildschirmrand nach oben. Streichen Sie auf einem iPad mit IOS 12 oder neuer auf dem Bildschirm von oben rechts nach unten. Bei älteren Versionen streichen Sie von unten nach oben.

WLAN VERBINDUNG HERSTELLEN

Bevor Sie mit der Simulation beginnen, stellen Sie sicher, dass sich Controller, Monitor und Assessment im gleichen WLAN befinden. Gehen Sie hierzu auf dem Home Bildschirm zu Einstellungen > WLAN und wählen Sie das entsprechende Netzwerk aus. Wiederholen Sie dies auf allen Geräten.



SOFTWAREBEDIENUNG


SYSTEME VERBINDEN

Um die Systeme erfolgreich zu verbinden, nehmen Sie den Sensor aus der Ladevorrichtung und stellen Sie sicher, dass der Akku des Sensors nicht leer ist. Im nächsten Schritt verbinden Sie bitte Ihren Controller mit dem Monitor. Nach einer erfolgreichen Verbindung sollten Sie nun die Oberfläche wie im folgenden Bild vorfinden.






Bringen Sie im nächsten Schritt den Sensor in die Nähe des Monitors, um eine Verbindung aufzubauen. Dafür wählen Sie auf dem Controller den Reiter Menü und drücken auf "CPR-Sensor". (Wird bei dem verwendeten Monitor das erste Mal das CPR Feedback verwendet, fragt dieser, ob die App auf Bluetooth zugreifen darf. Dies mit "Ok" bestätigen).

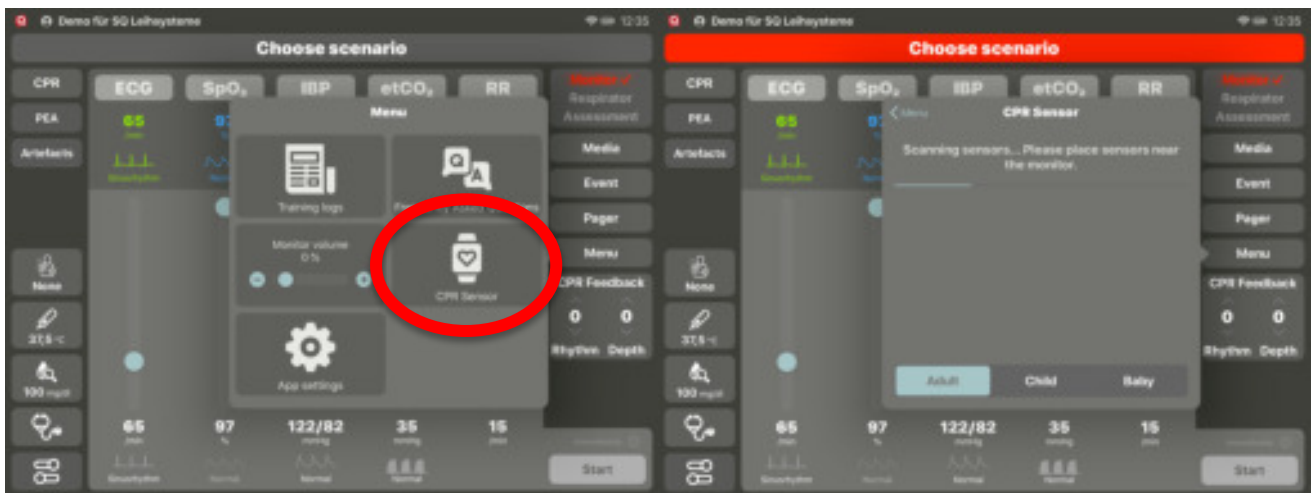

Der Monitor findet nun alle Sensoren, welche sich in der Nähe befinden, hierzu muss Bluetooth eingeschaltet sein! Tippen Sie nun auf verbinden, der gewählte Sensor blinkt am Anfang kurz auf.

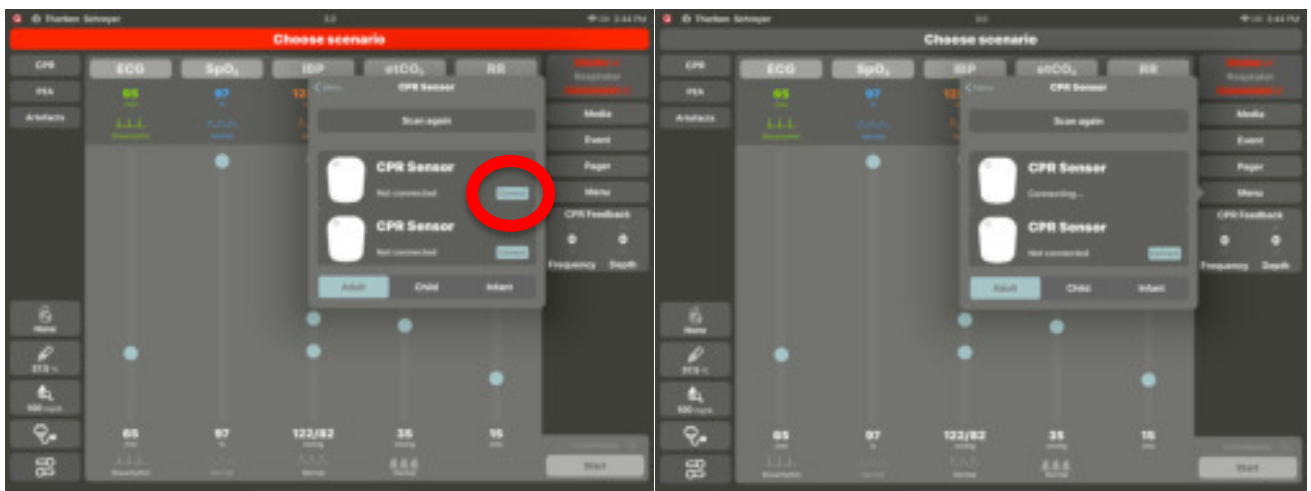

SENSOR KALIBRIEREN

Wenn der CPR Feedback Sensor das erste Mal mit dem System verbunden wird benötigt dieser eine Kalibrierung. Diese ist unbedingt notwendig, damit korrekte Daten vom Sensor gesendet werden können. Beim ersten Verbinden oder nachdem der Sensor entladen war, öffnet sich ein entsprechendes Dialogfenster

Sollte der Sensor erneut kalibriert werden müssen, weist das System Sie automatisch darauf hin.



CPR POD

Sobald Sie den Sensor erfolgreich verbunden haben und auch keine Kalibrierung mehr notwendig ist, stecken Sie den Sensor in den mitgelieferten CPR Pod. Hierbei achten Sie bitte auf die richtige Ausrichtung des Sensors, die Oberseite muss hierbei im Pod nach oben zeigen.



FALSCH



RICHTIG



IMPRESSUM

SKILLQUBE GmbH
Schafäckerweg 24, 69168 Wiesloch, Deutschland

Amtsgericht – Registergericht – Mannheim HRB 716968
Sitz Wiesloch – Geschäftsführerin: Julia Wallburg, Prokuristen: Georg Hirsch, Thorben Schreyer

e-Mail: info@skillqube.com
Homepage: www.skillqube.com

Tel.: 06222 / 38 62 65
Fax.: 06222 / 38 63 65

USt-IdNr. DE 289937847

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie jederzeit unter skillqube.com/impressum abrufen.