



Manuale utente qubeCPRFeedback



Versione 21/10/2020



AVVERTENZE GENERALI	3
SMALTIMENTO	3
AGGIORNAMENTI	3
IMPOSTAZIONI DI SISTEMA	3
APRIRE IL CENTRO DI CONTROLLO	3
INSTAURARE UNA CONNESSIONE Wi-Fi	3
UTILIZZO DEL SOFTWARE	4
TARARE IL SENSORE	6
CPR POD	6
NOTE LEGALI	7



AVVERTENZE GENERALI

SMALTIMENTO

Poiché le nostre spedizioni possono contenere batterie e accumulatori, ai sensi della legge tedesca sulle batterie (BattG) siamo tenuti ad informarLa di quanto segue:

Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Le batterie esauste possono contenere sostanze nocive che possono danneggiare l'ambiente o la salute dell'utente, se conservate o smaltite scorrettamente. Le batterie contengono però anche preziose materie prime, quali ad es. ferro, zinco, manganese o nichel, che possono essere riciclate.

Può rispedirci le batterie usate o restituirle gratuitamente nelle vicinanze (ad es. nel negozio, nei punti di raccolta comunali o nel nostro magazzino spedizioni). La consegna nei punti vendita è limitata alle quantità abituali per gli utenti finali e alle batterie esauste che il commerciante offre o ha offerto come batterie nuove nel proprio assortimento.

AGGIORNAMENTI

Si prega di eseguire aggiornamenti a nuovi sistemi operativi del produttore del tablet Apple esclusivamente previa autorizzazione di SKILLQUBE. Si prega tuttavia di aggiornare regolarmente l'applicazione per garantirne la completa funzionalità e compatibilità. In caso di domande o problemi tecnici è possibile ricevere assistenza su www.skillqube.com/support.

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

Con qubeSERIE è possibile modificare le impostazioni predefinite in tutti i monitor e nel controller. Le impostazioni comprendono, ad esempio, la modifica delle unità di temperatura, respirazione artificiale e glicemia o l'impostazione sui monitor della durata della rianimazione DAE

APRIRE IL CENTRO DI CONTROLLO

Per aprire, scorrere dal basso verso l'alto il bordo di una schermata a piacere. Su iPad con IOS 12 o più recente scorrere dal basso verso l'alto sullo schermo. Nelle versioni meno recenti scorrere dal basso verso l'alto.

INSTAURARE UNA CONNESSIONE Wi-Fi

Prima di iniziare la simulazione, accertarsi che il controller, il monitor e l'assessment siano connessi alla stessa rete Wi-Fi. A tale scopo, accedere a Impostazioni > Wi-Fi sulla schermata Home e selezionare la rete corrispondente. Ripetere tale operazione su tutti i dispositivi.



UTILIZZO DEL SOFTWARE

COLLEGARE I SISTEMI

Per collegare correttamente i sistemi, rimuovere il sensore dal dispositivo di ricarica e accertarsi che la batteria sia carica. Collegare quindi il proprio controller al monitor. Dopo il corretto collegamento si dovrebbe visualizzare l'interfaccia illustrata nella figura seguente.






Nel passaggio successivo spostare il sensore vicino al monitor per instaurare un collegamento. A tale scopo, selezionare la scheda Menu sul controller e cliccare su “Sensore di RCP”. (Se nel monitor selezionato viene utilizzato per la prima volta l’RCP-Feedback, questo chiede se l’app possa accedere al Bluetooth. Confermare con “Ok”).



Il monitor trova ora tutti i sensori nelle vicinanze, a tale scopo è necessario accendere il Bluetooth! Cliccare ora su Connetti, inizialmente il sensore selezionato lampeggia brevemente.

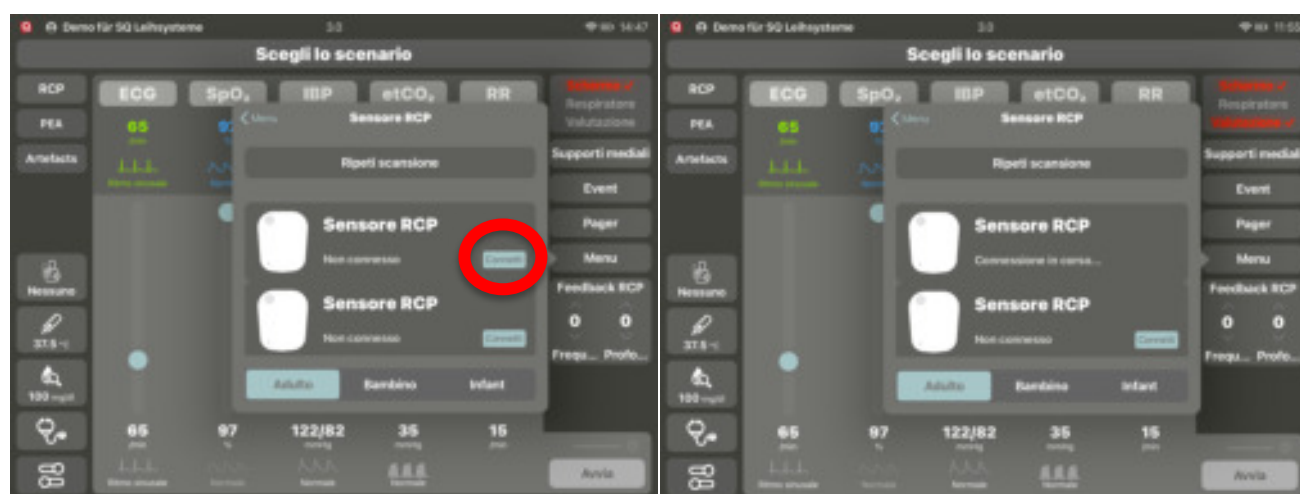

TARARE IL SENSORE

È necessario tarare il sensore RCP-Feedback, se viene collegato al sistema per la prima volta. Si apre una finestra in cui si può avviare direttamente la taratura.

Ad un secondo collegamento il sensore verifica se sia necessario tararlo nuovamente. Se il sensore deve essere tarato compare un'altra finestra.



CPR POD

Non appena il sensore è stato collegato correttamente e non è necessaria alcun'altra taratura, inserire il sensore nel CPR Pod in dotazione. Durante tale operazione prestare attenzione al corretto orientamento del sensore, il lato superiore deve essere rivolto verso l'alto nel Pod.



SBAGLIATO



GIUSTO



NOTE LEGALI

SKILLQUBE GmbH
Schafäckerweg 24, 69168 Wiesloch, Germania

Sezione B del registro delle imprese [HRB] dell'*Amtsgericht* [tribunale di prima istanza tedesco] - registro delle imprese del tribunale - di Mannheim 716968
Sede Wiesloch – Amministratore delegato: Julia Wallburg, procuratori: Georg Hirsch, Thorben Schreyer

E-mail: info@skillqube.com
Homepage: www.skillqube.com

Tel.: 06222 / 38 62 65
Fax.: 06222 / 38 63 65

N. di partita IVA DE 289937847

Le nostre condizioni generali di contratto sono consultabili in qualsiasi momento su skillqube.com/impressum.